

# Quick start guide

## Safety, Warranty

### WARM BODY BELT

당신의 건강을 위한 원적외선 온열복대  
슬립메이트 월바디벨트 네오프렌

### 사용자 설명서

### A/S INFO 서비스 정보

#### A/S 접수

- A/S 접수 시는 당사 지정 택배회사를 통해 발송하셔야 합니다. 만일 다른 택배회사 또는 쿠너버스 등 당사 지정 택배회사 이외의 운송수단을 이용하여 제품을 발송하실 경우 비용은 고객 전액 부담입니다.
- 제품 발송 시에는 품질보증서를 기재하여 함께 동봉하여 보내주시기 바랍니다.
- 국내에서 판매된 제품을 해외에서 국내로 A/S 발송 시 왕복 운송비는 고객 부담입니다.
- 슬립메이트 홈페이지에서 온라인 A/S 신청을 하시면 더욱 빠르게 처리 받으실 수 있습니다.

#### 무상수리 및 교환 처리가 되지 않는 사항

- 품질 보증 기간이 경과한 후 성능 불량 및 고장이 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인해 고장 난 경우
- 임의로 분해 조립하였거나 타사의 부품 등을 사용하였을 경우
- 사용 전압의 이상 또는 콘센트 불량에 의한 고장 및 화재 발생의 경우
- 사용 설명서 상의 경고 및 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 천재지변에 의한 제품 고장 또는 결함이 생긴 경우
- 제품 보증서 공란에 내용이 기재되어 있지 않은 경우

#### 서비스 센터 안내 1599-9534

제조/판매 시스트로닉스 | 주 / 슬립메이트 | 주  
주소 경기도 부천시 송내대로 388 부천테크노파크 203동 #303-2  
www.sleepmate.co.kr

안녕하세요. 슬립메이트 입니다.

슬립메이트 월바디벨트를 구입해주셔서 대단히 감사합니다.  
본 설명서에는 제품 동작 설명 및 조작 방법에 대한 내용을 담고 있습니다. 안전한 제품 사용을 위하여 제품 사용 시 반드시 설명서를 숙지하여 사용해주시기 바랍니다.

이 제품은 원적외선이 다량 발생하는 발열실을 사용한 온열 벨트로서 공인 인증기관에서 안전 검사 및 전자파, 원적외선 인증을 받은 프리미엄 온열 제품입니다.

슬립메이트 온열 벨트는 5V 직류 전원 배터리로 구동하여 간편하게 사용할 수 있으며, 저전력 기술을 접목시켜 한번의 충전으로 장시간 사용이 가능하여 효율적인 제품입니다. 또한 인체에 유해한 화학물질을 전혀 사용하지 않고, 원적외선이 다량 발생하는 발열실을 자체 개발하여 언제 어디서나 따뜻하고 건강하게 관리할 수 있는 제품입니다.



A. 제품명 : 슬립메이트 전기찜질기	D. 정격전압 : DC 5V 10W	G. 제조원 : 시스트로닉스   주
B. 모델명 : 네오프렌 온열복대	E. 제어온도 : 35 ~ 60 °C	H. 판매원 : 슬립메이트   주
C. 안전인증 : XH070401-18001	F. A/S 전화 : 1599-9534	I. 제조년 : 2018년

### PRODUCT WARRANTY 품질보증서

제품명	슬립메이트 원적외선 온열 복대		
모델명	보증기간 1년		
구입일	년	월	일
구입처			
성명	연락처		
주소			

A/S 시 구입일자가 기재된 본 품질보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 본 제품에 대한 보증은 품질보증서에 기입된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 본 제품은 가정용으로 영업용도로 사용할 경우에는 무상 수리가 불가합니다.
- 명시되지 않은 사항은 공정거래위원회 고시 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
- 품질보증기간은 구입일로부터 1년입니다.
- 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.

당사의 품질보증조건에서 정한 내용 이외의 부주의 등으로 인한 모든 손실과 본 제품을 사용함에 있어 당사가 예측 불가능한 결함 및 천재지변으로 인하여 사용자 또는 제 3자가 직접 또는 간접적인 피해를 입은 어떠한 경우라도 당사는 책임을 지지 않습니다.

#### 원적외선 방출

원적외선이 다량 발생하는 발열실을 사용하여 몸속 깊숙이 원적외선이 전달되어 신진대사를 촉진시키고 만성피고, 통증을 완화시켜 줍니다. 또한 재봉틀을 통한 수작업으로 튼튼하게 제작되어 오랜 기간 사용이 가능합니다.

#### 유해 전자파 차단

5V 직류 전원 배터리로 구동하여 유해 전자파로부터 안전합니다.

#### 뛰어난 경제성

고효율 섬유소재인 발열실을 개발하여 작은 전력으로도 높은 온열감을 느낄 수 있습니다. 10,000mAh 용량의 보조 배터리 기준 최대 6시간 30분 동안 사용이 가능합니다.

#### 3단계 온도 조절

각자의 체감온도에 맞춰 간단한 버튼 조작으로 45 ~ 55 °C까지의 온도조절이 가능합니다.


#### 편리한 휴대성

두께가 얇아 착용감이 우수하며, 별도의 콘센트 선이 필요없어 장소 제한없이 사용이 가능합니다.

#### 물세탁 가능

집에서 간편하게 물세탁이 가능하여 청결하게 사용할 수 있습니다. (세탁시에는 전원버튼이 있는 부위를 제외한 나머지 부위를 솔로 가볍게 닦아내어 손세탁 후 자연건조 하시기 바랍니다)


## PRODUCT COMPONENTS 제품 구성

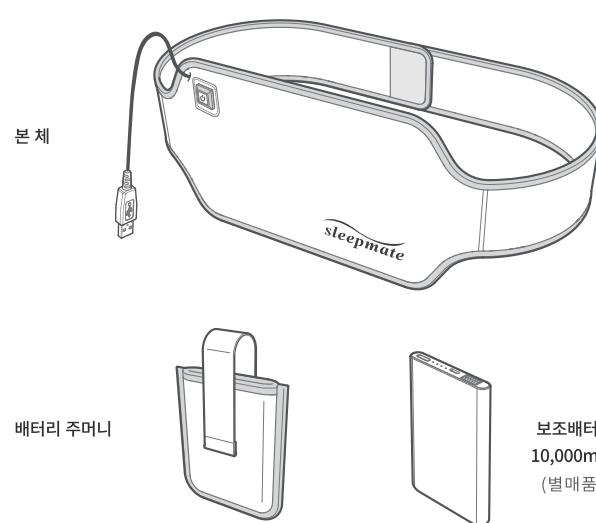


- 보조 배터리를 배터리 주머니에 넣으신 후 본체의 원하는 위치에 부착하세요.
- 본체 세탁시 전원버튼이 있는 부위를 제외한 나머지 부위를 솔로 가볍게 닦아내어 손세탁 후 자연건조 하세요.
- 세탁기/건조기(가스,전기)에 사용하지 마세요.

## HOW TO USE 사용 방법

A. 원하는 위치에 배터리 주머니를 부착한 뒤, 배터리 주머니에 보조 배터리를 넣어 주세요.

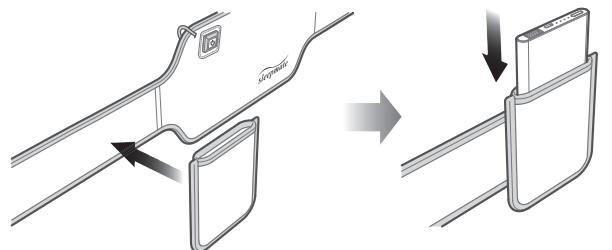

B. 고정끈으로 보조 배터리가 빠지지 않도록 단단히 고정하여 주세요.

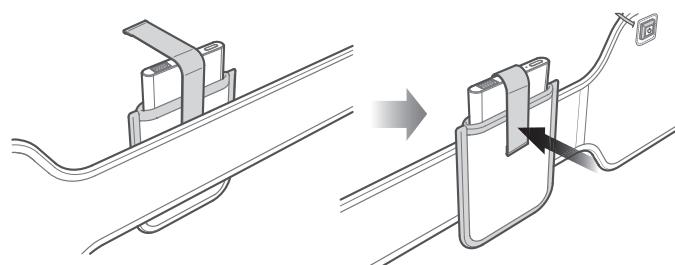

## PRODUCT SPECIFICATION 제품 사양



### 월바디벨트 네오프렌

- 사이즈 free (24 ~ 36 inch)
- 정격전력 DC 5V 10W
- 사용온도 (°C) 35~60



### 배터리 (별매품)


- 사이즈 130 x 71 14.1 mm
- 정격용량 10,000mAh 3.85V
- 입력단자 Micro USB
- 정격 입,출력 5.0V 2.0A




- 제품의 사양 및 디자인은 품질향상을 위해 변경될 수 있으며, 형태의 차이가 다소 있을 수 있습니다.
- 제품 사용 시 제품 고유의 냄새가 날 수 있으나, 인체에 무해하며 냄새는 점차 사라집니다.
- 배터리 전량 표시등이 모두 꺼지면 방전 상태이며, 충전기를 연결하여 충전 후 사용하세요.
- 사용 및 충전 시 사용설명서를 반드시 읽고 입출력 연결 단자를 바르게 연결하세요.

## HOW TO USE 사용 방법

C. 복대 케이블을 보조 배터리 USB 포트에 연결시켜 주세요.

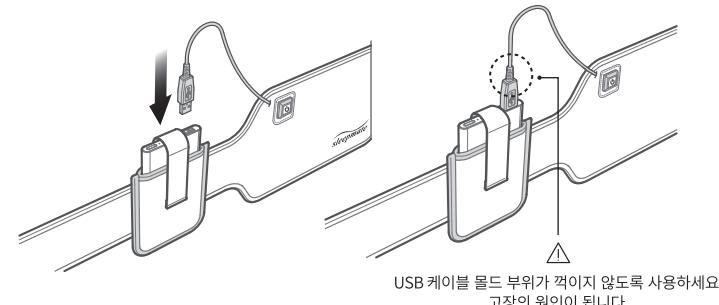


D. 복대를 착용 부위에 감아 사이즈에 맞춰 길이를 조절한 뒤 벨크로로 고정하여 사용하세요.

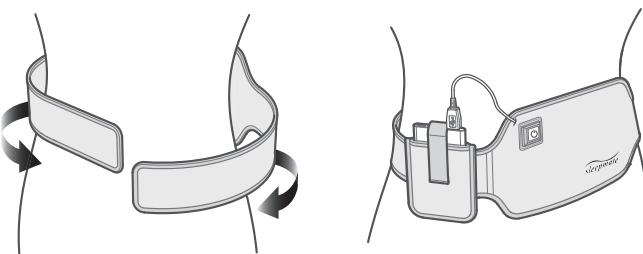

## HOW TO USE POWER BUTTON 전원 스위치 사용 방법

- 본 사용시간은 권장 배터리 DC 5V 2.0A 사용 기준입니다.
- 반드시 보조배터리의 전원을 켜 후 복대 전원 스위치를 2초간 눌러주세요.
- 처음 버튼 선택 시 애열로 인하여 고온 (빨간색) 상태로 표시되며, 3~5분 뒤 자동으로 중온 (파란색)으로 바됩니다.
- 처음 사용 시 고온 (빨간색) 상태를 유지하려면, 다시 반복 선택하여 고온 (빨간색)으로 설정해주시기 바랍니다.
- 사용하는 보조 배터리의 품질과 사용기간 경과 정도에 따라 사용시간이 달라질 수 있습니다.

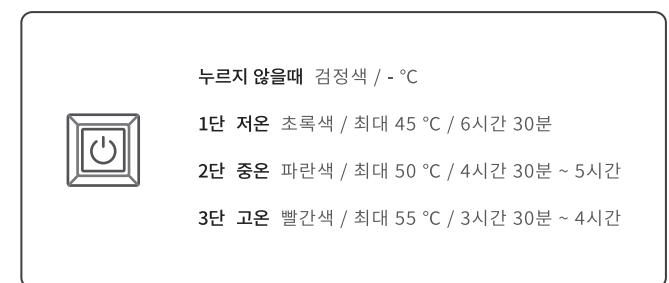

## CAUTIONS ON USING 사용 시 주의 사항

다음의 주의 사항은 제품을 안전하고 정확히 사용하여 얘기치 못한 위험과 손해를 방지하기 위한 것입니다. 준수 사항을 지키지 않을 시 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 수 있습니다.

- !
- 한 부위에 1시간 이상 사용할 경우 화상의 우려가 있으니 여러 부위로 이동하면서 사용하세요.
  - 반드시 옷 위에 사용해야하며 맨살에 직접 사용하지 마세요.
  - 바닥에 엎드리거나 누워서 사용하지 마세요.
  - 이불, 담요 등을 덮고 사용하지 마세요.
  - 저온 화상을 입기 쉬운 취침 상태에는 사용하지 마세요.
  - 전기 매트, 히트 등 타 발열 및 보온 제품과 겸용으로 사용하지 마세요.
  - 충전시 케이블과 단자를 잘 확인하고 정확하게 끼워 주세요.
  - 보조 배터리와 충전기를 분리한 후 사용하세요. 동시 사용시 충전기 과열의 위험이 있습니다.



- 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 제품을 핀이나 날카로운 것으로 찌르지 마세요.
- 제품에 심한 압력이나 충격을 주지 마세요.
- 젖은 손으로 연결 단자를 넣거나 빼지 마세요.
- 비닐 제품이나 가구, 소파 등 열에 약한 곳에 두지 마세요.
- 과열에 반응하지 못하는 신경마비 환자는 절대로 사용하지 마세요.
- 노약자가 사용할 경우 보호자의 관리하에 사용하세요.
- 사용중 외형적 파손이 발생할 경우 손으로 직접 만지지 마세요.
- 임산부와 유아는 절대로 사용하지 마세요.